


Smile



MALVESTIO®
Made in Italy

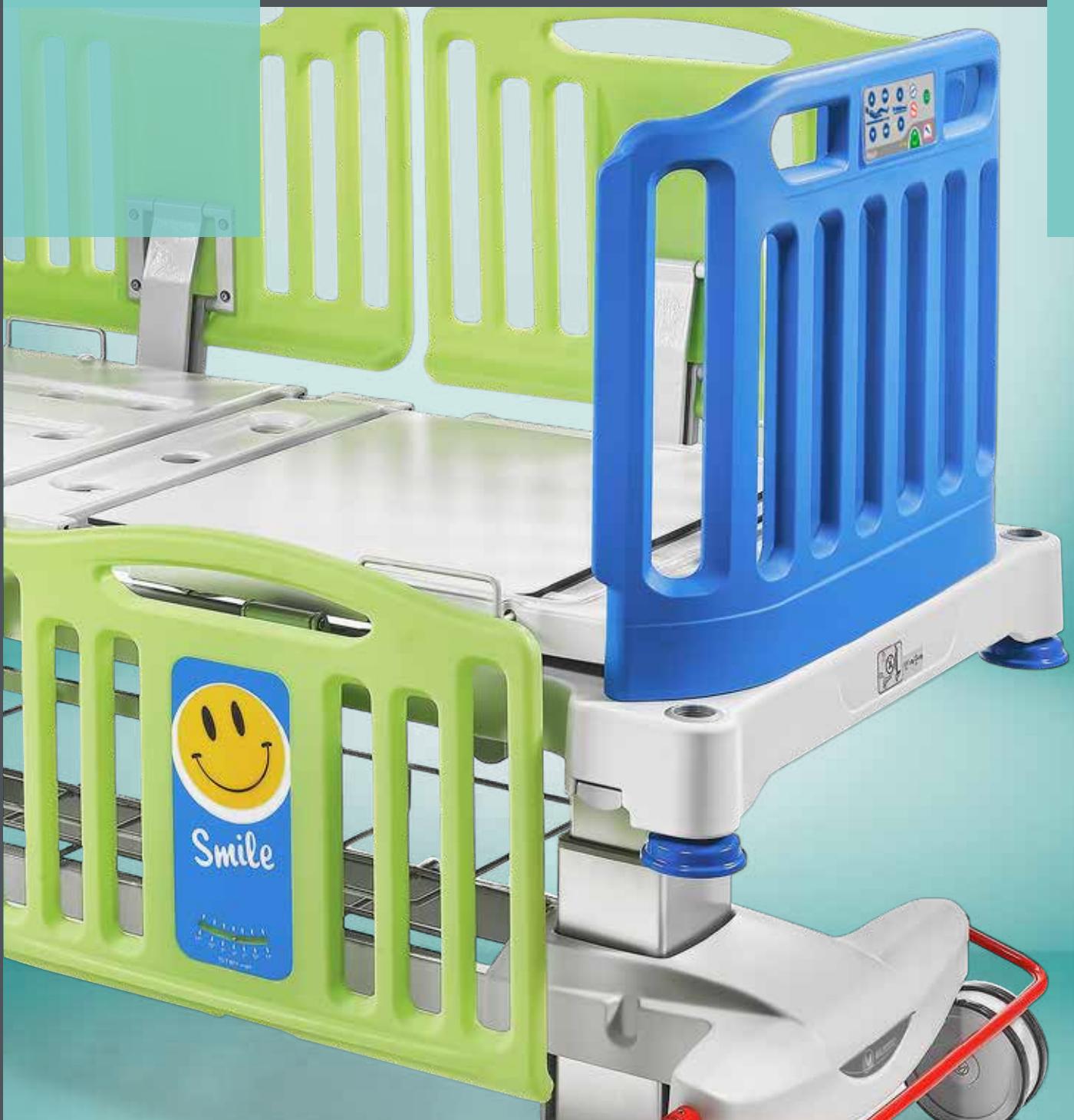

Art. 348650



•Altezza variabile

Adjustable height
Altura variable
Hauteur variable

**min. 55
max 95 cm**

**•Trendelenburg e
Controtrendelenburg**

Trendelenburg and
Reverse-trendelenburg
Trendelenburg y
Contratrendelenburg
Declive et Proclive

15°



Variante disponibile su richiesta. - Optional feature, upon request.
Version disponible bajo petición. - Version disponible sur demande.



Variante colore disponibile su richiesta
Colour version available upon request
Versión en color disponibles bajo petición
Cette couleur est disponible sur demande

Art. 346069
Porta bombola ossigeno.
Oxygen cylinder holder.
Porta botella de oxígeno.
Porte-bouteille oxygène.
(Optional)

Smile

Letto elettrico ad altezza variabile Height adjustable electric bed Cama eléctrica de altura variable Lit électrique à hauteur variable

Art. 348650

Dim. cm 183/218x98.



Letto elettrico a 3 sezioni ad altezza variabile su due colonne verticali motorizzate. Basamento in tubolare di acciaio verniciato, su cui sono applicate ruote gemellate di Ø 150 mm con comando di blocco/sblocco simultaneo. Piano rete in ABS termoformato con sovraccopertura gambale scorrevole in laminato stratificato. Il piano rete, lungo cm 158, si allunga elettricamente fino a cm 198. Spalle in materiale plastico colorato in massa; la spalla lato testa è asportabile. Lo schienale è dotato di comando a leva per lo sblocco rapido di emergenza, posto su ambo i lati. La sezione gambale è inclinabile in più posizioni, mediante sistema a cremagliere ad azionamento manuale; la regolazione dell'inclinazione è ottenibile in qualsiasi posizione di allungamento del piano rete.



Bed, electric, 3 sections, height adjustable on two motorised vertical columns. Lower base in tubular steel with epoxy-powder coating, with four twin wheels Ø 150 mm, central brake. Thermoformed ABS mattress platform with fixed HPL covering over the sliding footrest. The mattress platform has a length of cm 158 and can be electrically lengthened till cm 198. The bed ends are made of mass coloured plastic material. The head side bed end can be removed. The bed is equipped with an auxiliary rechargeable battery. The backrest is equipped with emergency release levers at both sides of the bed. The footrest can be adjusted manually in more positions by a teeth rack; the adjustment of the footrest can be achieved independently from the extension stage of the mattress platform.




Cama eléctrica de 3 secciones, altura variable sobre dos columnas verticales motorizadas. Base inferior en tubo de acero pintado, con 4 ruedas dobles de Ø 150 mm con freno centralizado. Plataforma de ABS termoformado con sección de apoya piernas recubierta de laminado estratificado (HPL). Plataforma de colchón de 158 cm de largo, extensible eléctricamente hasta 198 cm. Cabecera y piecera de material plástico de alta resistencia; La cabecera es extraible. Incorpora baterías auxiliares recargables. Mando de emergencia CPR para el desbloqueo rápido del respaldo en ambos los lados. La sección apoya piernas puede ser regulada en más posiciones por accionamiento manual; la regulación de la inclinación puede ajustarse en cualquier posición de extensión de la plataforma.



Lit à 3 sections avec hauteur variable sur deux colonnes verticales motorisées. Quatre roues, double galet, diamètre 150 mm avec blocage/déblocage simultané, installées sur le châssis en tube d'acier laqué. Plan de couchage en ABS thermoformé avec couverture supérieure en stratifié de la section jambes coulissante. Le plan de couchage, de 158 cm de long, se rallonge électriquement jusqu'à 198 cm. Dosserets en matériau plastique coloré dans la masse; le dossier côté tête est amovible. Le lit est équipé de batterie auxiliaire. Le relèvement buste est doté de débrayage d'urgence manuel avec commande par levier sur les deux côtés. La section jambes est réglable en plusieurs positions, par système manuel à crémaillère, en toutes les positions de rallonge du lit.

L'azienda si riserva di apportare ai suoi prodotti, senza alcun preavviso, tutte le modifiche tecniche e/o estetiche ritenute opportune.
The Company reserves the right to introduce all the technical and/or aesthetic modifications deemed necessary to their products without prior notice.
La empresa se reserva el derecho de aportar a sus productos, sin previo aviso, todas las modificaciones técnicas y/o estéticas consideradas oportunas.
La société se réserve le droit d'apporter à ses produits les modifications techniques et/ou esthétiques considérées opportunes sans être tenue d'en donner préavis.



MALVESTIO S.p.A.

Via G. Marconi, 12 D - 35010
Villanova - Padova - Italy
Tel. +39 049 9299511
Fax +39 049 9299500
info@malvestio.it
export@malvestio.it



malvestio.it



ISO 9001
ISO 13485



MALVESTIO22

L'azienda si riserva di apportare ai suoi prodotti, senza alcun preavviso, tutte le modifiche tecniche e/o estetiche ritenute opportune.

The Company reserves the right to introduce all the technical and/or aesthetic modifications deemed necessary to their products without prior notice.

La empresa se reserva el derecho de aportar a sus productos, sin previo aviso, todas las modificaciones técnicas y/o estéticas consideradas oportunas.

La société se réserve le droit d'apporter à ses produits les modifications techniques et/ou esthétiques considérées opportunes sans être tenue d'en donner préavis.

Graphic design by MMBF
Printed by Grafiche Antiga on July 2022
Copies n° 1000 - Revision n° 04


Made in Italy